

Кат. №3004

Бульон с сердечно-мозговым экстрактом с SPS, CO₂ и вакуумом

Хранить при температуре 2 - 25°C

Brain Heart Infusion Broth with SPS, CO₂ & Vacuum

Для культивирования аэробных бактерий из образцов взрослых

ФОРМУЛА в г/л:

Бульон с сердечно-мозговым экстрактом обезвоженный	35.0	Антикоагулянты S.P.S. (полианетолсульфонат натрия)	0.3
--	------	---	-----

Конечная величина pH $7,2 \pm 0,2$ при температуре 25°C

С вакуумом и CO₂

Жидкая среда для гемокультивирования: В упаковке 10 флаконов по 50 мл

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Гемокультуры – это система контроля бактерий в крови, используемая в основном в больницах, поликлиниках и т.д. Являются наиболее важным способ диагностики этиологии инфекций кровотока и сепсиса, и имеют важное значение в лечении пациентов. Поставляются во флаконах из нейтрального стекла, содержат питательную среду, SPS, вакуум и модифицированную атмосферу.

Бульон с сердечно-мозговым экстрактом с SPS, CO₂ и вакуумом – это жидкая среда, богатая питательными веществами, которая подходит для культивирования нескольких аэробных микроорганизмов.

Богатая питательная основа бульона с сердечно-мозговым экстрактом снабжает питательными веществами, витаминами, минералами и аминокислотами, необходимыми для роста различных микроорганизмов. Декстроза является углеводным источником энергии, а хлорид натрия обеспечивает осмотический баланс.


ИНСТРУКЦИЯ

Для получения образца необходимо пунктировать вену пациента при помощи иглы для внутривенных инъекций, которая соединяется прозрачной трубкой с другой иглой, которая вводится во флакон путем прокалывания резиновой крышки флакона с жидкой средой для гемокультивирования. Для регулирования потока крови нужно повернуть колесико и переместить его на другой конец до упора. Трубка таким образом пережимается.

1. Удалить защитную металлическую крышку с флакона.
2. Протереть резиновую крышку флакона ватным тампоном, смоченным в спирте.
3. Подготовить руку пациента: наложить жгут, продезинфицировать кожу спиртом. Во избежание повторного загрязнения не касайтесь продезинфицированной области руки.
4. Снять колпачок с иглы для внутривенных инъекций.
5. Приступить к пунктированию вены.
6. Ослабить жгут, кровь потечет по прозрачной трубке. При помощи колесика остановить поток крови перед второй иглой.
7. Немедленно снять защитный колпачок со второй иглы.
8. Проткнуть второй иглой резиновую крышку флакона, отпустить колесико.
9. Ввести во флакон максимально-возможный объем крови (5-10 мл для взрослых).
10. Заблокировать колесико, чтобы остановить поток крови.
11. Вытащить иглу из флакона.
12. Закрыть колпачок иглы.
13. Протереть резиновую крышку ватным тампоном, смоченным в спирте.

14. Вытащить иглу из вены.
15. Флакон со средой и кровью аккуратно перемешать.

Рекомендуется незамедлительно поместить флаконы с гемокультурой в инкубатор и ежедневно просматривать флаконы. В случае получения положительного результата (возникновение помутнения) или неясного результата (нет уверенности в том, положителен ли результат или отрицателен), необходимо как можно скорее провести целенаправленное исследование путем окрашивания или посева на различные питательные среды для идентификации и определения спектра чувствительности бактерий к антибиотикам.

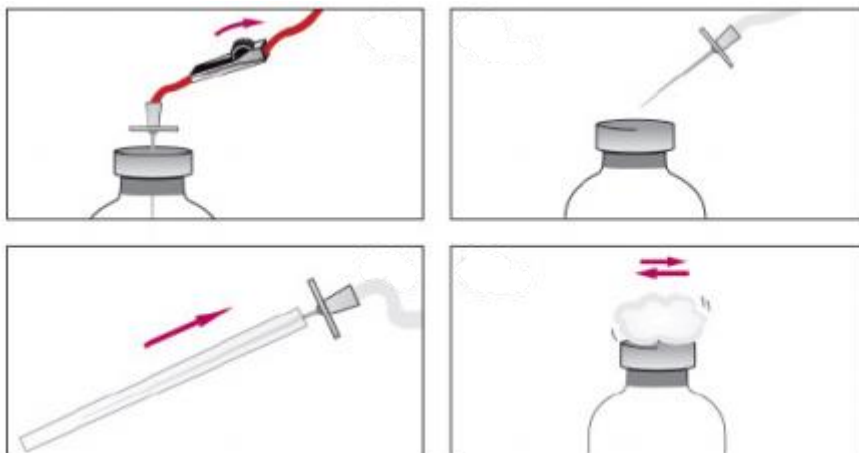

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

При использовании среды на тестовых культурах после инкубации при температуре 37°C через 24 часа были получены следующие результаты.

Микроорганизмы	Рост
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Хороший
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303	Хороший
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Хороший
<i>Brucella abortus</i> ATCC 4315	Умеренный